

WB-4MS, Ūdens vanna-termostats



APRAKSTS

Ūdens vanna-termostats **WB-4MS** ir paredzēts tehnoloģiju realizācijai ķīmijas un farmācijas, kā arī medicīnas un bioloģijas pētījumu jomās.

WB-4MS nodrošina palielinātu temperatūras stabilitāti (līdz pat 0.1°C) pateicoties iebūvētajam magnētiskajam maisītājam (apgriezienu regulācijas diapazons 250-1000 apgr./min).

Viegla uzstādīšana, augsta uzstādītās temperatūras noturība, kompakts izmērs, atraktīvs un moderns dizains padara šo ūdens vannu plaši pielietojamu.

Vienlaicīgi var uzstādīt 2 papildus mēģeņu statusus.




SPECIFIKĀCIJA

Vannas tilpums	4 litri
Temperatūras iestatīšanas diapazons	+25°C ... +100°C
Temperatūras kontroles diapazons	5°C virs apkārtējās ... +100°C
Temperatūras iestatīšanas solis	0.1°C
Temperatūras stabilitāte	±0.1°C
Temperatūras viendabīgums pie +37°C	±0.1°C
Maisīšanas apgriezienu regulēšanas diapazons	250–1,000 apgr./min
Digitāla laika iestatīšana	1 min–96 st. / nepārtraukti (solis 1 min)
Taimera skaņas signāls	+
Displejs	LCD, 2 x 16 simboli
Temperatūras, laika un rotācijas ātruma cipariska iestatīšana	+
Plastmasas vāks ar nerūsējošā tērauda pamatni	+
Kluss	+
Darba tilpums	235x135x110 mm
Gabarītmēri (PxDxA)	340x270x250 mm
Svars	3.4 kg
Jauda	230 V, 50 Hz / 600 W (2.6 A) / 120 V, 60 Hz / 670 W (5.6 A) / 100 V, 50/60 Hz / 600 W (6.0 A)
Barošana	230 V, 50/60 Hz vai 120 V, 50/60 Hz

KAT. NUMURS

With base BP-1 and lid	Ar BP-1 pamatni un vāku
BS-010406-AAA	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010406-AAB	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-010406-AA3	230VAC 50/60Hz AU plug
BS-010406-AA7	100VAC 50/60Hz US plug
BS-010406-AAC	120VAC 60Hz US plug
BS-010406-DK	IQ OQ dokuments
BS-010406-EK	PQ dokuments

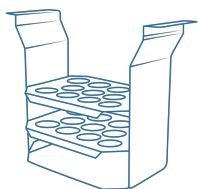


TR-5/30
BS-010406-KK
statīvs

Mēģeņu statīvs \varnothing 30mm
mēģenēm, ietilpība 5 mēģenes




TR-16/19
BS-010406-FK
statīvs

Mēģeņu statīvs, \varnothing 16 līdz \varnothing 19mm
mēģenēm, ietilpība 16 mēģenes

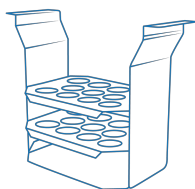

TR-30/13
BS-010406-IK
statīvs

Mēģeņu statīvs, \varnothing 10 līdz \varnothing 13mm
mēģenēm, ietilpība 30 mēģenes

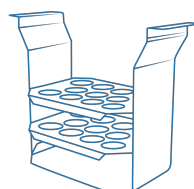

TR-44/11
BS-010406-JK
statīvs

Mēģeņu statīvs 2 / 1.5 ml
mikromēģenēm, ietilpība 44
mikromēģenes